


PicoSens™ Hydroxyproline Assay Kit

(Colorimetric)

BM-HYP-100, 100 assays

제품 원리

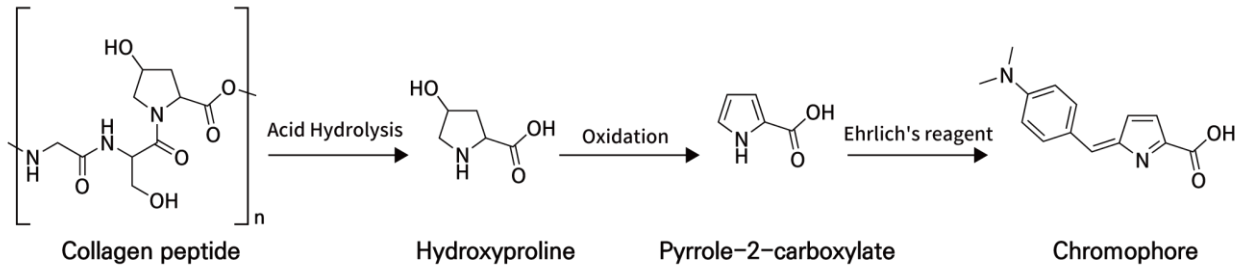

BIOMAX PicoSens™ Hydroxyproline Assay Kit (Colorimetric)는 Hydroxyproline이 산화되어 Pyrrole-2-carboxylate를 형성하고 Ehrlich's reagent와 결합하여 Chromophore를 형성합니다. Chromophore는 흡광도 560 nm에서 측정하여 Sample 내의 Hydroxyproline 양을 측정할 수 있습니다.

제품의 구성 및 보관 조건

Components	Size	Storage
Oxidation Buffer	10 ml	4°C
Chloramine T Concentrate	600 µl	
Perchloric Acid / Isopropanol Solution (PCA / IPA)	5 ml	
2X DMAB (in DMSO)	5 ml	
Hydroxyproline Standard (1mg/ml)	100 µl	

* 개봉하지 않은 제품은 빛을 차단한 상태에서 4°C 보관 시 6개월 간 안정적입니다.

검사 필요 장비 및 소모품

- ▶ 96-well Microplate (Clear, Flat bottom)
- ▶ Pipette & Sterile tips
- ▶ Concentrated HCl (~12N)
- ▶ Autoclave
- ▶ Evaporator, Dry oven or Heating block (60, 70, 120°C)
- ▶ Microplate reader (560 nm Filter)
- ▶ Pressure-tight polypropylene teflon or Screw vial

실험 전 준비 사항 및 보관 방법

- 제품의 모든 구성품은 상온에서 놔두어 완전히 녹인 후 사용합니다.
- Vial 뚜껑 내부에 시약이 묻어 있을 수 있으니 개봉 전 원심 분리합니다.
- **Chloramine T Concentrate**와 **DMAB Concentrate**는 사용 후 4°C에 보관합니다.
- 실험에 사용하고 남은 Hydrolyzed sample은 4°C 보관하여 사용합니다.

Chloramine T Reagent

Chloramine T Concentrate 6 μ l와 Oxidation Buffer 94 μ l을 혼합하여 만듭니다.

DMAB Reagent

2X DMAB Concentrate 50 μ l와 Perchloric Acid / Isopropanol Solution 50 μ l을 혼합하여 만듭니다.

* **Chloramine T Reagent**와 **DMAB Reagent**는 실험 전 필요한 만큼만 만들어 사용하여야 하며, 혼합된 용액은 2~3 h 내에 사용합니다.

Sample type

- Tissues
- Protein/Peptide hydrolysates
- Serum, Urine

실험 과정

- * 본 실험은 가수분해 및 건조과정의 시간이 많이 걸리므로 Sample 과 Standard preparation을 동시 진행할 수 있게 준비 후 진행해야 합니다.
- * 미지의 Sample 또는 처음 측정하는 Sample의 경우 측정값이 Standard curve 내에 위치하도록 예비실험을 진행한 후 사용을 권장합니다.

Sample preparation

Tissue or Protein / Peptide hydrolysates

- ① Tissues 및 Protein sample 10 mg에 D.W. 100 μ l를 넣고 Homogenization합니다.
- ② Homogenized sample에 Concentrated HCl (12N) 100 μ l를 넣어 혼합합니다.
- ③ Pressure tight polypropylene vial (Teflon cap)에 ② 혼합물을 넣고, 120°C에서 3 h 동안 가수분해를 진행합니다.
- ④ 가수분해가 완료된 Sample 10 μ l를 96-well Microplate에 분주하여 70°C Heat block / Oven에서 완전히 증발시킵니다.

Urine

- ① Urine sample 100 μ l와 Concentrated HCl (12N) 100 μ l을 혼합합니다.
- ② Pressure tight polypropylene vial (Teflon cap)에 ① 혼합물을 넣고 120°C에서 3 h 동안 가수분해를 진행합니다.
- ③ 가수분해가 완료된 Urine sample에 Activated charcoal 4 mg을 첨가하여 혼합한 뒤, 10,000 x g에서 3 min 동안 Centrifuge를 진행합니다.
- ④ 침전물과 Activated charcoal을 제거한 뒤 투명한 Urine sample만 분리합니다.
- ⑤ Sample 10 μ l를 96-well Microplate에 넣고 70°C Heat Block / Oven에서 완전히 증발시킵니다.

Standard preparation

- ① 1 mg/ml Hydroxyproline Standard 10 μ l와 D.W. 90 μ l를 혼합하여 0.1 mg/ml Hydroxyproline Standard를 준비합니다.
- ② 96-well Micoroplate 각 Well에 0.1 mg/ml Hydroxyproline Standard를 0, 2, 4, 6, 8, 10 μ l 분주하여 각 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 μ g/well씩 넣어줍니다.
* 0 μ g/well : Blank
- ③ Heat Block / Oven에서 완전히 증발시킵니다.

Reaction mix

- ① 각 Sample과 Standard well에 Chloramine T Reagent 100 μ l씩 첨가한 뒤 상온에서 5 min 간 반응 시킵니다.
- ② DMAB Reagent 100 μ l를 각 Well에 넣어준 뒤 60°C Heat block / Oven에서 90 min 동안 반응 시킵니다.
- ③ Microplate Reader를 이용하여 흡광도 560 nm에서 측정합니다.



결과 분석

- 모든 측정값에서 Standard 0 (Background)값을 빼줍니다.
- Standard Curve에 시료의 값을 대입하여 구한 Hydroxyproline의 양으로 다음 식을 이용하여 시료 내 Hydroxyproline의 농도를 구합니다.


$$C (\mu\text{g}/\mu\text{l}) = B/V \times D$$

C : Sample 의 Hydroxyproline 농도 ($\mu\text{g}/\mu\text{l}$)

B : 측정 Well 의 Hydroxyproline 양 (μg)

V : Well 에 분주한 시료의 부피 (μl)

D : Sample 희석 배율

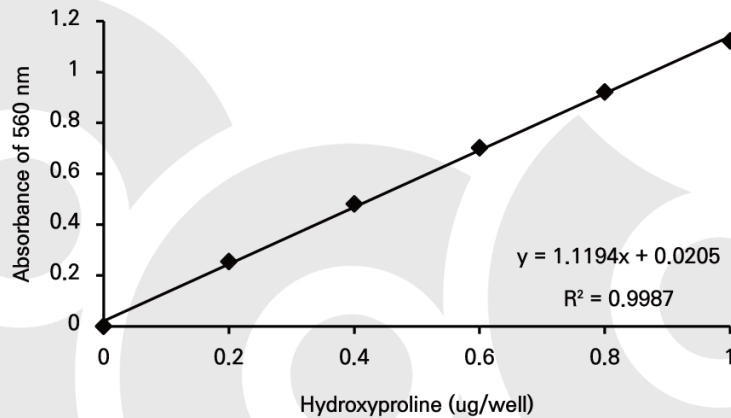

Hydroxyproline Standard curve

※ Spike sample: Sample 내의 어떤 성분이 반응에 영향을 주었을 가능성이 있는 경우, 예를 들어 Hydroxyproline 이 실제로는 0.5 μg 이 있지만 어떤 물질의 영향으로 인해 0.4 μg (80%)만 존재하는 것으로 결과값이 나타나는 경우가 있습니다. 이러한 에러를 보정하기 위해 Sample 과 별도로 Sample 에 일정량의 Standard 를 첨가한 Well 을 따로 설정하여 그 결과 값을 통해 실제 Sample 의 농도를 보정하는 방법입니다. 이 실험에서 Spike sample 을 이용한 경우 위 농도 계산식은 다음과 같이 정리됩니다.

$$\text{Sample 내 Hydroxyproline 의 양}(B) = OD1/(OD2 - OD1) * \text{Hydroxyproline Spike } (\mu\text{g})$$

OD1: Sample 의 OD 값 (Blank Corrected)

OD2: Spiked Sample 의 OD 값(Blank Corrected)

Hydroxyproline Spike: Sample 에 넣은 Hydroxyproline Spike 의 양

Related products

- BM-COL-100

PicoSens™ Total Collagen Assay Kit (Colorimetric)

* 안전한 사용을 위해 유해물질 정보는 MSDS를 참조하십시오.

Homepage : www.biomax.comShopping mall : www.biomaxmall.comE-mail : info@scgbiomax.com

Tel : 02-3296-3158 / Fax : 02-973-2858

(주) 바이오맥스 : 경기 구리시 갈매순환로166번길 46, 금강펜테리움 IX타워 CORE-C, 7층

Note